



E | F35

**NOTRE ASSISTANCE À LA TRACTION
LA PLUS PETITE ET LA PLUS LÉGÈRE**

F35 - VOTRE MODE DE VIE DYNAMISÉ



FATIGUÉ DES DISPOSITIFS A LA TRACTION ENCOMBRANTS?

Nous aussi. Parlons franchement: chaque petite poussée de son fauteuil roulant peut sembler anodine, mais jour après jour, la tension sur vos épaules s'accumule.

Les dispositifs d'assistance électrique peuvent être la solution idéale, comme les super-héros du monde de la mobilité, mais certains sont tout simplement encombrants et trop lourds pour un usage quotidien - en particulier pour les petites escapades en ville ou lorsqu'il s'agit de voyager.

Empulse F35 est l'accord parfait entre style et praticité. Cette micro-assistance à la traction, ultra-portable, ne se contente pas d'attirer le regard – c'est votre ticket d'entrée pour une mobilité rapide et sans effort dans la jungle urbaine.



Notre assistance à la traction avec autant de fonctionnalités est la plus petite et la plus légère



Convient aux petites voitures et petits espaces de chargement



Très faible rayon de braquage et jusqu'à 15 km d'autonomie dans sa version 15 km/h (28 km dans sa version 6 km/h)



2 modes d'arrimage pour entrer, sortir, aller n'importe où



Se combine à la plupart des fauteuils roulants rigides et pliants



Batterie adaptée aux voyages, idéale pour les modes de transport (avion, bateau, train, voiture)



Scannez le QR code pour voir la F35 en mouvement!

CARACTÉRISTIQUES CLÉS



Idéal pour les arrêts fréquents : F35 se détache de la barre de liaison qui la relie au fauteuil en quelques secondes.

DEUX POSSIBILITÉS D'ARRIMAGE CHOISISSEZ LA VÔTRE SELON VOS BESOINS

1 "La plus rapide": Brevet en instance, arrimage en un seul geste pour des arrêts rapides en ville. La colonne de direction se détache facilement de l'adaptateur, tandis que la barre de liaison et le support central restent sur fauteuil roulant. Idéale pour les petits arrêts lorsque l'assistance F35 n'est pas nécessaire, par exemple dans un café, à l'université ou au bureau. Et le meilleur dans tout cela? elle se remet en place en quelques secondes quand vous avez besoin d'un petit coup de pouce.

Poignées rabattables et verrouillables: Plus besoin de se battre avec un équipement encombrant! Se range facilement dans le plus petit des coffres de voiture ou sur le siège arrière, permettant des transferts en voiture en toute autonomie.

Pièces restantes sur le fauteuil :
barre de liaison et support




Scannez le QR code pour voir comment s'accroche la F35 au fauteuil



2

2 "Pour le rangement": lorsqu'il est temps de passer du fauteuil roulant à la voiture, au canapé ou au lit, vous pouvez facilement retirer l'ensemble du dispositif de votre fauteuil. Il suffit de "déclipser" la colonne de direction et de retirer la barre de liaison en dévissant les pinces sur le fauteuil... une solution simple et efficace pour ranger votre F35.

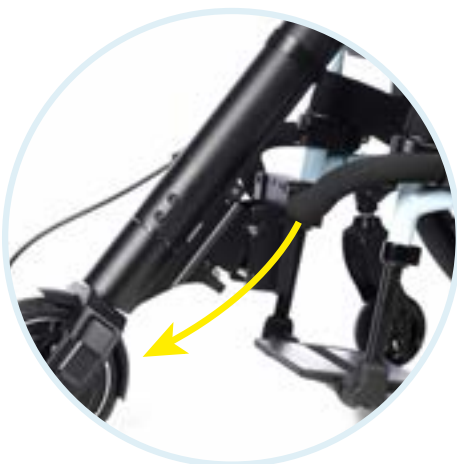

Démontage en deux parties plus légères pour faciliter le chargement (barre de liaison et la F35 peuvent être séparées)

LÉGÈRE ET COMPACTE POUR DES TRANSFERTS VOITURE EN TOUTE AUTONOMIE

Légère comme une plume: Que vous partiez seul ou accompagné, la F35 ne pèse que 7.5 kg (sans la barre de liaison), ce qui facilite grandement les transferts en voiture et favorise votre indépendance dans vos aventures quotidiennes.

Design compact et épuré: Un profil élégant et compact grâce à notre conception de tube tout-en-un, assurant une manipulation et un transport simples, sans l'encombrement.

CHARGEMENT

Batterie 4Ah adaptée à l'avion - compacte et puissante, elle répond exactement à vos besoins, pour les trajets en ville comme pour les voyages (veuillez-vous renseigner en amont auprès de votre compagnie aérienne pour connaître ses conditions spécifiques relatives à la batterie).

Système de Gestion de Batterie intelligent - le système et les cellules de batteries innovantes 21700 vous permettent de tirer le meilleur parti de chaque charge.

Rayon de Braquage Ultra Compact: que ce soit au milieu d'une foule ou dans un ascenseur - tourner est un jeu d'enfant.



Avec une **autonomie de 15 km***, appréciez une nouvelle liberté, allez où vous voulez.

* 15 km - version 15 km/h
28 km - version 6 km/h



Système de Freinage Puissant: Vous bénéficiez d'un double système de freinage - un frein électronique proportionnel et un frein tambour fiable - et d'un frein de parking pour un contrôle précis et une sécurité optimale lors de vos déplacements.



Régulateur de Vitesse: Maintient une vitesse constante en montée et en descente.



Vaincre les Pentes: Parking, rampes d'accès, transports en commun ... - surmontez avec brio ces obstacles gênants du quotidien! La F35 peut gravir une pente de 6°, même avec un poids maximal utilisateur de 110 kg.

Stabilité au Plus Haut Niveau: Dites adieu aux ballades instables! Grâce à un mécanisme de verrouillage, en instance de brevet, la F35 est pratiquement collée au cadre de votre fauteuil. Pas de secousses, pas de cliquetis - une stabilité à toute épreuve, juste une conduite ultra stable.



Moteur Puissant à Couple Élevé: Profitez d'une conduite dynamique grâce à un moteur de 250 watt, qui garantit une conduite souple et réactive.





3 Vitesses de Conduite disponibles: Choisissez votre rythme, qu'il s'agisse d'une vitesse confortable de 6 km/h, d'une vitesse modérée de 10 km/h ou rapide de 15 km/h*.

** Les vitesses au-dessus de 10 km/h sont autorisées uniquement sur les voies privées.*



Pas de Roue qui Patine: 3 niveaux d'accélération (Slow, Std, Fast) adaptant les performances à chaque environnement.



Le Port de Charge USB vous permet de charger votre téléphone à tout moment. Vous n'avez donc pas à vous soucier de décharger la batterie de votre téléphone lorsque vous utilisez la navigation ou écoutez de la musique.



Scannez le QR code pour accéder aux vidéos de mise en service!



ÉCLAIRAGE LED: La lumière LED s'intègre parfaitement au design de la F35, vous offrant un moyen pratique d'éclairer votre chemin et d'améliorer votre visibilité.

ÉCLAIRAGE LED

DONNÉES TECHNIQUES

Poids max. total (utilisateur et fauteuil roulant)	110 kg
Dimensions	915 mm x 584 mm x 610 mm (hauteur x largeur x profondeur)
Autonomie*	jusqu'à 15 km (15 km/h) jusqu'à 28 km (6 km/h)
Pente max	11% (6°)
Poids	à partir de 9 kg à partir de 7,5 kg
incl. batterie et barre de liaison poids de transport (sans barre)	
Largeur cadre avant fauteuil	260 - 480 mm / (1)
Coloris	noir
Vitesse Maximale réglable	6 km/h; 10 km/h / 15 km/h (vitesse réglable sur 3 niveaux)
Batterie	Lithium-Ion 36V 4Ah - 144 Wh
Temps de charge	2 heures - 2.5 heures
Taille roue motrice	6,5"
Moteur	250 watt
Frein	Système Double-Freinage (frein tambour mécanique + frein séparé électronique proportionnel) et frein parking
Garantie	selon réglementations locales
Conformité	EN12184

(1) Largeur du cadre avant du fauteuil mesurée du centre du tube du cadre avant au centre du tube opposé à la position du montage.



F35 - Page Produit Web



F35 - Tarif et Options

SUNRISE MEDICAL SE PRÉOCCUPE DE VOTRE SÉCURITÉ. Veuillez lire votre manuel d'utilisation pour connaître les instructions d'utilisation en toute sécurité et les consignes d'entretien.

** L'autonomie dépend de la surface du sol, du poids utilisateur, du comportement de conduite, de la température ambiante et du terrain, conformément à la norme ISO 7176-4.*

Pour plus d'informations sur les options et accessoires disponibles, veuillez vous référer à la fiche de mesure disponible sur notre site internet. Sunrise medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et données techniques de ses produits.

Les photos figurant sur la présente brochure et sur les autres documents commerciaux de la société SUNRISE MEDICAL ne constituent en aucun cas un descriptif technique précis des fonctionnalités du produit concerné. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et ses conditions d'utilisation, reportez-vous à la fiche technique ou au manuel d'utilisation.



Si vous êtes malvoyant, ce document peut être consulté au format PDF sur www.SunriseMedical.fr



PB-Empulse F35_FR_fr_RevA01_062024



www.SunriseMedical.fr

ACCESSORISEZ-LA!



Support Smartphone: Avec le support pour smartphone vous êtes joignable même en conduisant et vous garder le contrôle.



Adaptateur de Charge pour Voiture: Avec l'adaptateur de charge pour la voiture, vous êtes toujours parfaitement préparé, quelle que soit votre destination.



Antivol: L'antivol garantit que votre F35 reste à l'endroit où vous l'avez laissée, vous avez l'esprit tranquille, quel que soit l'endroit où vous vous garez.

