


Q700M^{HD}

Confort de conduite optimal et liberté maximale pour les personnes corpulentes



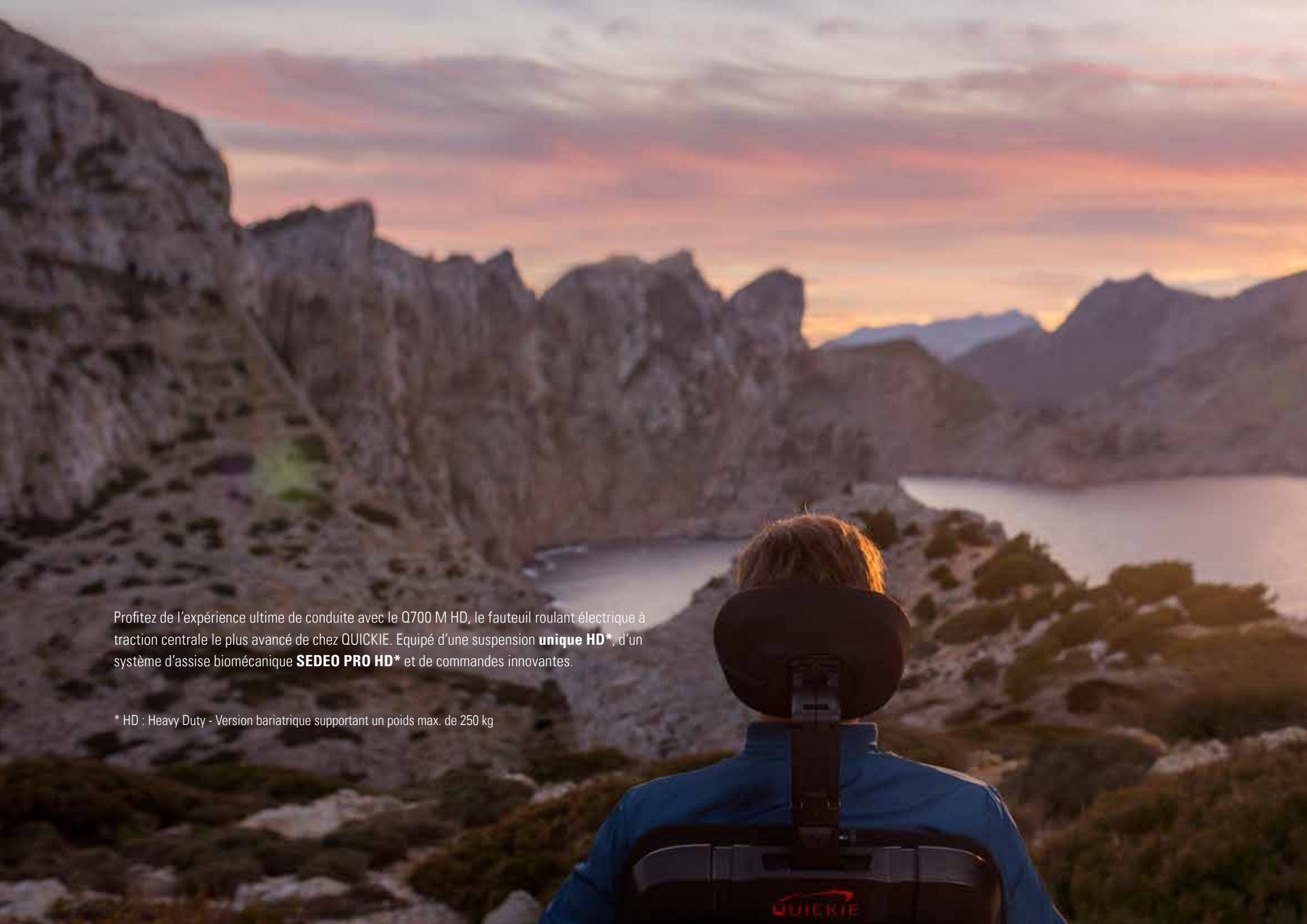

Profitez de l'expérience ultime de conduite avec le Q700 M HD, le fauteuil roulant électrique à traction centrale le plus avancé de chez QUICKIE. Equipé d'une suspension **unique HD***, d'un système d'assise biomécanique **SEDEO PRO HD*** et de commandes innovantes.

* HD : Heavy Duty - Version baratrique supportant un poids max. de 250 kg

UNE SOLUTION BARIATRIQUE

Découvrez l'expérience de conduite ultime avec le remarquable Q700 M HD, le fauteuil roulant électrique bariatrique haute performance avec un style et une maniabilité supérieurs.

Dotée d'une suspension HD unique pour une conduite en douceur, elle offre une expérience de conduite intuitive avec une base à traction centrale dotée des dernières technologies pour vous permettre de rester sur la piste en toute sécurité. .

Avec une largeur d'assise allant jusqu'à 66 cm et un poids maximal de 250 kg, le confort est de mise grâce à l'incroyable assise SEDEO PRO HD, le système d'assise biomécanique qui reflète la position naturelle de votre corps pour une position assise idéale à tout moment.



TECHNOLOGIE PREMIUM.

La technologie de la base motrice du Q700M a été conçue pour une utilisation extérieure, sur terrain irrégulier et offre une qualité éprouvée de nombreuses années. Grâce à la réingénierie de cette base, nous avons créé le fauteuil électrique d'extérieur haute performance et haute durabilité pour les Utilisateurs en surcharge pondérale.



TECHNOLOGIE ROUES MOTRICES CENTRALES

Offrant la même maniabilité que le Q700 M, vous bénéficiez d'un meilleur contrôle et d'un rayon de braquage de seulement 560 mm.



COMMANDE R-NET ADVANCED

Améliorez votre technologie embarquée avec ce grand écran HD, facile à lire et ces sélecteurs de commande simples à utiliser. Son Bluetooth intégré et sa technologie i-device vous permettent également de vous connecter à vos appareils intelligents depuis le confort de votre Q700 M HD.



28 km

AUTONOMIE

Boostez avec des **batteries** de **80 Ah**, vous pourrez vous rendre où vous le souhaitez sans vous soucier des performances de votre robuste version Heady Duty.



SUSPENSION HD

Lorsque le poids est placé vers l'avant, les roues directrices peuvent avoir du mal à s'articuler, entraînant de mauvaises transitions et un tangage accru. Notre suspension unique dotée d'une technologie de verrouillage et d'anti-tangage, bloque toutes les roues et la suspension lorsque celle-ci n'est pas engagée, réduisant ainsi la capacité du fauteuil à "basculer" vers l'avant. L'utilisateur reste ainsi stable et en position verticale dans son fauteuil.

MOTEURS PUISSANTS

Profitez de la puissance et de la vitesse au bout de vos doigts grâce aux **moteurs 4 pôles** à couple élevé. Avec une vitesse de pointe de 6 ou 8 km/h, le Q700 M HD relèvera tous les défis.




UN FAUTEUIL ÉLECTRIQUE SURÉQUIPÉ

Le Q700 M HD ne se contente pas d'offrir de **GRANDES performances**, il est également doté de **GRANDES fonctionnalités** pour répondre à vos besoins cliniques et à votre mode de vie. De plus, les fonctions d'assise électriques sont accessibles par simple pression d'un bouton grâce aux boutons assignables brevetés de **QUICKIE!**

ASSISE SEDEO PRO HD

Le système d'assise SEDEO PRO HD offre un excellent choix d'options pour créer l'ajustement parfait sans sacrifier le confort. Choisissez parmi une variété d'accoudoirs, de repose-pieds, d'appui-tête, coussins d'assise et de dossier - incluant le dossier de positionnement JAY J3 et le coussin de prévention anti-escarre JAY Balance.

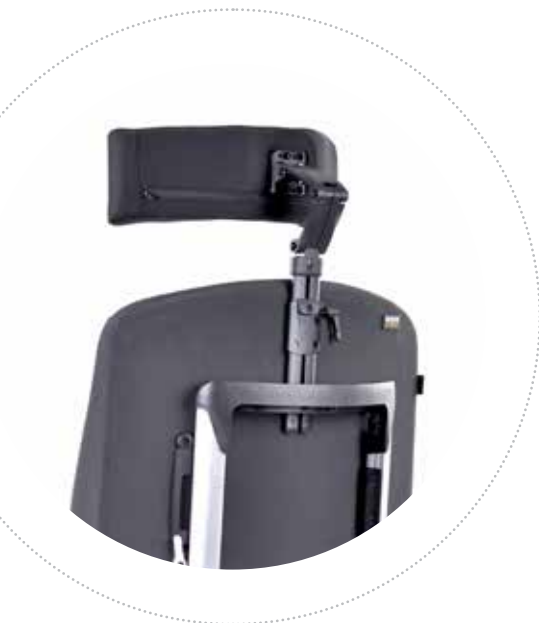

OPTIONS CLINIQUES ÉLECTRIQUES

Ne soyez pas limité en ce qui concerne les options électriques. Le Q700 M HD offre une bascule d'assise de 30° pour une charge maximale de **250 kg** et une inclinaison de dossier électrique de 30°.



REPOSE-PIEDS

Disponibles avec des potences escamotables à 70°, il peut être équipé de repose-jambes manuels ou électriques pour obtenir un positionnement et un confort supérieurs. Le relève-jambes central de **90 à 180°** (disponible en version manuelle ou électrique) réduit l'espace à l'avant de votre fauteuil, ce qui vous permet de vous rapprocher des objets de la vie quotidienne tels que les tables. Possibilité d'abaisser le repose-pieds jusqu'au sol pour faciliter les transferts.

ACCOUDOIRS RELEVABLES ET MULTIRÉGLABLES

Cet accoudoir réglable en hauteur, en largeur et en angle peut s'enrouler autour de vous, offrant ainsi de meilleures possibilités de positionnement tout en maintenant la largeur de votre Q700 M HD aussi compacte que possible. La barre stabilisatrice additionnelle permet d'éviter la flexion vers le bas qui peut parfois se produire au cours d'une utilisation quotidienne.

Ci-contre : accoudoirs relevables et multiréglables SANS barre stabilisatrice



CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR. À L'AISE À L'INTÉRIEUR.

Tournant sur son propre axe, le Q700 M HD offre une conduite intuitive et une excellente manoeuvrabilité dans les espaces restreints et compacts grâce à sa base étroite (622 mm) et à son rayon de giration (560 mm). Vous pouvez également passer facilement sous les tables et accéder aux véhicules adaptés.



560 mm

RAYON DE GIRATION

Grâce à sa technologie de traction centrale, la roue motrice du Q700 M HD est placée directement sous votre position assise, il y a donc plus de poids sur la roue motrice.

1070 mm

LONGUEUR BASE MOTRICE

ASSISE SEDEO PRO.

**Assise renforcée avec une plaque
d'assise SEDEO allongée, supports,
accoudoirs et repose-pieds renforcés.
Le Q700 M HD supporte un poids
Utilisateur maximal de 250kg.**



DOSSIER SEDEO PRO, FLEXIBLE

Ne sacrifiez pas votre confort pour vous tenir droit. Contrairement aux coussins de dossier classiques, ce dossier s'enroule autour de votre colonne vertébrale et en épouse la forme pour assurer un contact, un confort et une stabilité. Parce qu'il vous enveloppe, les retours latéraux intégrés épousent vos côtés, ce qui permet à la mousse de se mouler à vos courbes anatomiques et de maintenir votre tronc stable et aligné. L'immersion est telle que même les postures cyphotiques modérées à sévères peuvent être prises en charge.



ASSISE BARIATRIQUE

Largeurs d'assise de 500 mm jusqu'à 660 mm
Profondeurs d'assise de 460 mm jusqu'à 560 mm



UN STYLE AFFIRMÉ

Avec le Q700 M HD, nous avons porté le style à un niveau supérieur. Avec un châssis noir mat, un câblage et des composants cachés, combinés à un capitonnage bien taillé, le Q700 M HD a définitivement un style élégant et moderne.



COLORIS INSERTS



BLANC



ARGENT



ORANGE



NOIR



VERT POMME



ROUGE



BLEU

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise	500 - 660 mm
Profondeur d'assise	460 - 560 mm
Hauteur d'assise	440 - 490 mm
Hauteur de dossier	460 - 510 mm
Longueur segment jambier	305 - 460 mm
Bascule d'assise électrique	0 - 30°
Largeur totale base motrice	620 mm
Longueur totale (avec potence centrale)	1070 mm
Rayon de giration	560 mm
Diamètre de giration	1120 mm
Pente maximum de sécurité	6°
Franchissement maximal	75 mm
Autonomie maximale (selon ISO 7176-4)	25 km
Poids produit (avec batteries 80 Ah) (configuration de base)	190 kg
Poids Utilisateur maximal	250 kg
Roues motrices	14"
Roues directrices	6"
Vitesses	6 km/h - 8 km/h
Moteurs	2x500 W - 4 poles
Batteries	2 x 80 ah
Electronique	R-Net
Crash testé	Oui - approuvé pour le transport face à la route dans un véhicule (selon ISO 7176-19)
Usage et environnement	Pour les personnes à mobilité réduite, intérieur et extérieur. Type fauteuil: classe B

Légende :

Pente maximum de sécurité : pente dans laquelle le fauteuil répond favorablement à l'ensemble des tests de stabilité dynamique, de stabilité statique, de performance et de freinage, de franchissement de pente, en montée comme en descente.

Autonomie : calcul théorique réalisé à partir d'une mesure de consommation effectuée dans des conditions idéales : sol plat, sans contrainte de virage ou d'obstacle.

Diamètre de giration : diamètre du cercle nécessaire pour faire un tour complet

Sunrise Medical se soucie de votre sécurité. Veuillez lire votre manuel d'utilisation pour connaître les consignes de sécurité et d'entretien.

Pour plus d'informations, sur les fonctions, options et accessoires, veuillez vous référer à la fiche de mesure. Sunrise Medical se réserve le droit de modifier les données techniques de ses produits sans préavis.

« Les photos figurant sur la présente brochure et sur les autres documents commerciaux de la société SUNRISE MEDICAL ne constituent en aucun cas un descriptif technique précis des fonctionnalités du produit concerné. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et ses conditions d'utilisation, reportez-vous à la fiche technique ou au manuel d'utilisation ».



SUNRISE MEDICAL SAS
ZAC De La Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00
E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr