

SMART^F 2.360


PROFIL UTILISATEUR

- ✓ Pour les soins permanents et de longue durée
- ✓ Pour les paraplégiques
- ✓ Très bien adapté à de nombreuses pathologies, même pour des cas plus graves
- ✓ Pour utilisateurs paralysés des membres inférieurs (transfert latéral, entraînement par les mains courantes)

FAUTEUIL ROULANT PLIANT AVEC REPOSE-JAMBES INTÉGRÉS

Le fauteuil roulant pliant SMART^F allie légèreté et maniabilité parfaite dans un design innovant. Absolument dynamique et stable - c'est ce que l'on doit ressentir dans un fauteuil roulant adaptatif pliable moderne. Des dimensions compactes, un système de pliage d'avant-garde et des transferts faciles en font le compagnon idéal dans toutes les situations. Que ce soit au quotidien, pendant les loisirs, à la maison ou en déplacement.

- Aluminium 7020 haut de gamme
- Une dimension super réduite à l'état plié et une cinématique de pliage parfaite assurent un pliage très facile
- Convient à tous les systèmes de chargement usuels
- Tous les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres et facilitent la manipulation au quotidien
- Des matériaux de haute qualité tels que l' et des matériaux semi-finis spécialement conçus garantissent un faible poids total
- Réglages parfaits du châssis

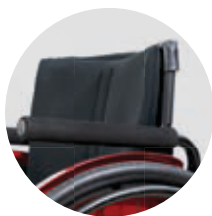

Étrier d'accoudoir pivotant (en option)



Largeur très étroite à l'état plié, de 280 mm pour carrossage de 0° ou 330 mm pour carrossage de 3°, hauteur à partir de 650 mm



Accoudoirs en carbone (en option)



Hauteur du dossier individuellement réglable



Frein innovant léger et pivotant en aluminium, extrêmement facile à déclencher



Repose-jambes intégrés



Réglage individuel du châssis



Poids d'utilisateur jusqu'à 150 kg



3 longueurs de cadre : court, moyen ou long, avec ou sans rétrécissement du cadre



Largeurs de siège de 320 – 520 mm

