



# Piper

Code LPPR 9264580 + 9364784

Réf. 22500

*Nouveauté*



VERT




Piper est une poussette à dossier inclinable (SANS OUTIL) dédiée aux enfants qui ont des besoins spécifiques de positionnement, pour les accompagner dans leurs déplacements quotidiens de courtes durées.

Châssis pliant en aluminium léger. La conception du revêtement du dossier offre la possibilité d'un réglage en hauteur des harnais d'épaules pour un positionnement au plus près des besoins de l'utilisateur. Possibilité d'adjoindre des accessoires (cf. bon de commande). Toutes ces caractéristiques font de la Piper une poussette très maniable pour une utilisation urbaine ou sur des chemins légèrement bosselés.

## CARACTÉRISTIQUES

- Taille unique ;
- Dossier réglable en inclinaison ;
- Repose-pieds monobloc réglable en hauteur ;
- Harnais 5 points ;
- Frein au pieds ;
- 4 roues démontage rapide ;
- Roues increvables avant 17,5 cm (6,7") pivotantes avec blocage directionnel ;
- Roues arrière increvables 22,5 cm (8,9") ;
- Revêtement lavable en machine à 30° ;
- Poignée de poussée monobloc pliante ;

## ACCESSOIRES POUR PIPER

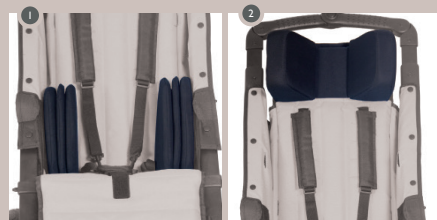

RÉFÉRENCE	ACCESSOIRES
22497	Jeu de coussins réducteurs de largeur d'assise
22498	Appui-tête
22495	Cale d'abduction
22496	Jeu de sangle de pied
22499	Capote
22518	Housse anti pluie (se fixe sur la capote)
22515	Sac thermique été
22516	Sac thermique hiver
22521	Accroche pour taxi
22523	Réducteur d'assise

## Les produit

- ✓ Système d'inclinaison de dossier unique très ergonomique et sans outil ;
- ✓ Pliage ultra-compact ;
- ✓ Charge maxi 50kgs.
- ✓ Réglage sans outils.

## DIMENSIONS

Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur

[www.cree.fr](http://www.cree.fr)

EN CM	AGE APPROXIMATIF USAGER	TAILLE APPROXIMATIVE USAGER	PROFONDEUR ASSISE	LARGEUR ASSISE	HAUTEUR DOSSIER	HAUTEUR ASSISE REPOSE-PIEDS	ANGLE ASSISE DOSSIER (°)	ANGLE ASSISE HORIZONTAL (°)	
T U	22500	2-8 ans	120-145	29	35 (26-35*)	68	25-37,5	90/135	26
HAUTEUR POIGNÉE DE POUSSÉE	DIAMÈTRE ROUES AVIARR	HAUTEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR PLIÉE	LARGEUR PLIÉE (SANS ROUES)	HAUTEUR PLIÉE	CHARGE MAXI	POIDS TOTAL
100	17,5 (6,7")/22,5 (8,9")	100	108	59	102	31	30	50	14,5

\*avec coussins latéraux