

# zip



Poussette pliable

# Zip



- Poids réduit
- Pliage facile et compact
- Charge utile jusqu'à 60 kg (taille 2)
- Nombreux accessoires

 **Euromove.**

# Zip au quotidien

Les buggys pour enfants doivent répondre à des critères précis afin de faciliter la vie des parents dans la vie quotidienne. La poussette ZIP répond à ces exigences.

Une gamme d'accessoires permet d'individualiser la poussette suivant les besoins de l'enfant.

Un grand choix de combinaison-couleur est disponible.



Noir (001)

## Revêtement nylon



Gris (304)



Noir (320)

## Coussin (option)



Noir (346)



Turquoise (349)



Rose (347)



Gris (348)



Léger et de dimension réduite la poussette **Zip** se range facilement dans le coffre d'une voiture. Le coussin d'assise ou le repose-pied ne doivent pas être démontés avant le pliage de la poussette. Pour diminuer encore le volume plié, les grandes roues s'enlèvent facilement.



# Accessoires ZIP



Arrêt roues pivotantes




Frein de roulage



Sécurité de transport



Coussin dossier

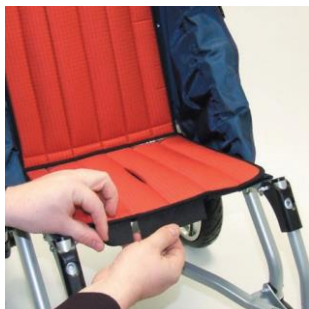

Coussin assise



Appuie tête



Ceinture ventrale



Ceinture 5 points



Sangle cheville



Barre de protection



Table thérapeutique



Sac hiver



Protection pluie



Capote + protection transparente



Support buggy



Parasol



Sac de transport



Plot d'abduction



Inclinaison dossier



Ceinture d'abduction

# ZIP en détail

## Équipement de base

- buggy en aluminium, confortable, pliable et compacte pour enfants (max 60 kg)
- revêtement en nylon renforcé
- dossier inclinable
- inclinaison du repose pied réglable
- hauteur du repose pied réglable
- 2 profondeurs d'assise
- choix de 2 hauteurs de dossier (1 hauteur de dossier pour la taille 2)
- roues équipées de roulements avec choix de bandages : plein ou gonflable
- roues avant pivotantes
- grandes roues arrières avec frein de stationnement
- assemblage par boulons et renforts dans les tubes
- encombrement réduit (78 cm/ 91 cm de long) ; système de pliage breveté

## ZIP données techniques

Dimensions (cm) poids (kg)	Taille 1	Taille 2
Profondeur d'assise	30/35 cm	35/40 cm
Largeur d'assise	35 cm	40 cm
Hauteur dossier standard	60 cm	68 cm
Hauteur dossier long	66 cm	–
Hauteur pied – pli du genou	20 – 39 cm	25 – 44 cm
Inclinaison de l'assise	18°	
Inclinaison dossier	90°-100° (90°-120° option)	
Inclinaison repose pied	-10° / 0° / +10°	
Hauteur totale (poignée)	110 – 112 cm	
Largeur totale	59 cm	65 cm
Diamètres des roues (arrière- avant)	30 cm / 20 cm	
Dimensions plies (L x l x h)	78x36x39 cm	91x44x40 cm
Poids	12,5 kg	13,5 kg
Charge autorisée	50 kg	60 kg
Rayon de braquage	126 cm	140 cm